

**DIVINA**  
PRO  
**DIVINA**



# Hydrafacial

*7 SOINS EN UN*

- Efficacité
- Sécurité
- Rapide
- Comfortable



# Hydracial

*7 SOINS EN UN*

- Nettoyage en profondeur
- Raffermissement de la peau
- Traitement de l'acné
- Hydratation
- Réparation de la peau
- Pénétration d'essence
- Analyse de la peau



Teint terne




Les pores larges



Rides



Peaux sèches

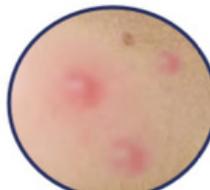

Acné




Relâchement de la peau




## Dermabrasion à hydrogène et à l'oxygène


Ouvre les pores, adoucit la couche cornée, nettoie la peau en profondeur, l'hydrate en profondeur, élimine les points noirs, nettoie la peau en profondeur.

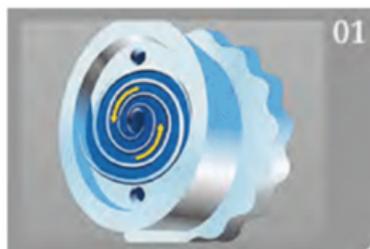

La solution est pulvérisée par l'entrée de la buse. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

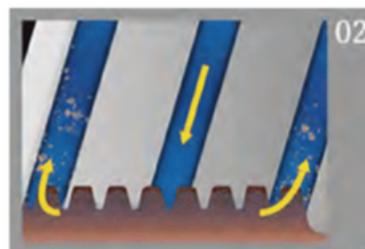

Les résidus et la solution restante sont aspirés dans le conteneur par les entrées

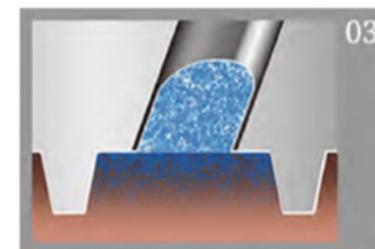

La solution est déposée à la surface de la peau par l'embout de la buse.

Les utilisateurs peuvent choisir la tête de traitement dont ils ont besoin en fonction de l'état de leur peau



Tête turbine hydro de nettoyage



Tête de micro-dermabrasion




Tête en silicone souple pour le nettoyage



Tête de nettoyage par tuyau

## Poignée refroidissante RF et marteau refroidissant

Cool RF handle utilise un système intelligent de refroidissement de l'épiderme. En refroidissant préalablement l'épiderme, la majeure partie de l'énergie RF est poussée vers la couche profonde de la peau. Tout en protégeant l'épiderme des brûlures, l'énergie thermique est concentrée dans la couche profonde de la peau pour stimuler la régénération du collagène.

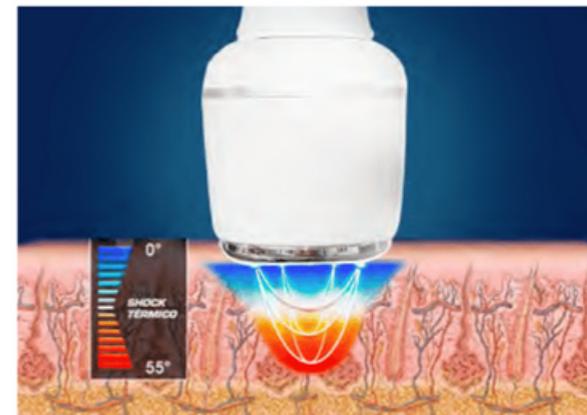

## Poignée à atomisation de polymère par spray

Combiné à des produits liquides, le liquide est converti en petites molécules semblables à un brouillard par atomisation à haute pression, puis rapidement déversé dans le derme par pulvérisation à haute pression afin d'obtenir un effet d'hydratation en profondeur.





## Poignée ultrason


Les vibrations ultrasoniques rapides ouvrent les pores permettant la diffusion des essences

---

## Poignée radiofréquence bipolaire

Lifting et raffermissement, amélioration le contour des yeux et améliore la régénération du collagène



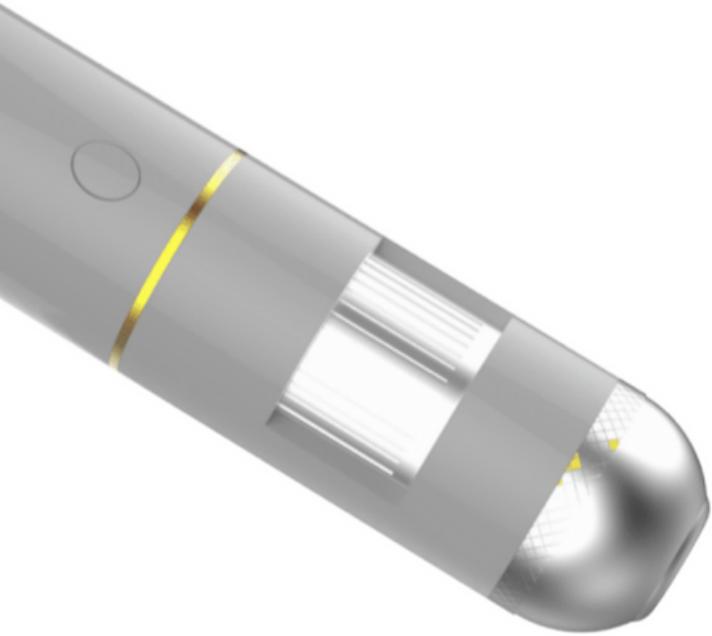

### HD sonde de détection de la peau

La sonde de détection cutanée haute définition utilise une caméra haute définition de 5 000 000 pixels et d'une résolution de 1280x1024, qui permet d'observer clairement l'état réel de la peau et de chaque pore.



### Poignée à vibration ultrasonique de nettoyage

Les ondes de vibration à haute fréquence éliminent les peaux mortes, éliminent les points noirs, adoucissent les kératinocytes de la peau et nettoient la peau en profondeur.



# DIVINA PRO DIVINA

## Spécifications techniques



Puissance	600 W
Fréquence RF	3 MHz
Écran tactile	10,4"
Pixels	20 millions
Sonde dermabrasion	10 pics
Aspiration	0-90 kPa
Tension	100-240 V 50-60 Hz